

ACCE. 16010

Gebruiksaanwijzing

Q-Go



Nijland Cycling, Gebruiksaanwijzing 2026

Branding & Design
Studio Debuut

Realisatie
Raoul Alferink

Fotografie
Melvin Winkeler

Redactie
Nijland Cycling

Risicoklasse: 1
Uitgifte datum: 1-1-2026
Versie: 1
Taal: Nederlands

Q-Go

Model	EAN:
Q-Go Junior (Small)	8720261260464
Q-Go 1 (Medium)	8720261260440
Q-Go 2 (Large)	8720261260457

© 2026 Nijland Cycling. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van eventuele onjuistheden of drukfouten. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming.



Inhoudsopgave

04

Informatie

Inleiding	4
Contactgegevens	5
Conformiteit	5
Eerste gebruik	5
Gebruik	5

06

Beheer

Tips	6
Onderhoud	6
Veiligheid	7
Voorkom diefstal	7

08

Componenten

Reflectoren	8
Banden	8
Remmen	8
Zadel	9
Stuur	9
Handvatten	9
Slot	10
Accessoires	10
Transport en opslag	10

11

Documentatie

Specificaties	11
Garantie	12
Garantiebewijs	12
Formulier service, onderhoud en modificaties	13
Onderhoudshistorie	14
Notities	15



Informatie

Inleiding

Deze handleiding geeft u belangrijke informatie over het gebruik van de Q-Go. We raden u aan om deze goed door te lezen voordat u de loopoplossing voor het eerst gebruikt. Zo leert u de belangrijkste onderdelen kennen en ontdekt u hoe u veilig en comfortabel op pad kunt.

Het is belangrijk om de instructies in deze handleiding te volgen. Dit zorgt niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. Bovendien helpt het om uw hulpmiddel in goede staat te houden en er optimaal van te genieten.

Bewaar deze handleiding op een handige plek, zodat u deze altijd kunt raadplegen. Voor de nieuwste versie kunt u contact opnemen met Nijland Cycling. We zorgen ervoor dat u altijd de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft.

We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de Q-Go. Geniet van elke rit, wetende dat u goed voorbereid op pad gaat.

Met vriendelijke groet,

Team Nijland Cycling



Contactgegevens

Nijland Cycling B.V.
Telgenweg 12
8111 CM Heeten

+31(0)572 382 222

info@nijland.com

www.nijland.com

Conformiteit

Nijland Cycling verklaart als fabrikant dat de Q-Go wordt geproduceerd conform de MDR verordening (EU) 2017/745, risicoklasse 1. De conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de fabrikant.

Eerste gebruik

Uw dealer dient onderstaande punten met u door te nemen:

1. Verzeker u ervan dat de Q-Go juist is afgesteld voor uw lichaamslengte en gewicht.
2. Oefen in een rustige omgeving om vertrouwd te raken met de Q-Go en een goede controle te ontwikkelen.
3. Oefen het gebruik van de handrem op verschillende soorten ondergrond.
4. Probeer op verschillende snelheden te lopen en leer hoe u het evenwicht moet bewaren.
5. Neem de tijd om te wennen aan het hulpmiddel en verhoog geleidelijk de afstand van de rit.
6. Controleer regelmatig de Q-Go en zorg ervoor dat alles op de juiste manier werkt en is afgesteld.

Paraaf Dealer: _____

Datum: _____

Gebruik

De Q-Go loophulp is ontworpen voor personen die ondersteuning nodig hebben bij het lopen, bijvoorbeeld door verminderde mobiliteit, stabiliteit of coördinatie. Afhankelijk van de situatie kan toezicht tijdens het gebruik nodig zijn. Wanneer de gebruiker een beperkt geestelijk waarnemingsvermogen heeft, is het belangrijk dat een toezichthouder duidelijke instructies geeft over het veilige gebruik van de loophulp. De gebruiker moet in staat zijn om zelfstandig te bewegen en op een verantwoorde manier deel te nemen aan het verkeer, met inachtneming van de geldende verkeersregels. Het is essentieel dat de instructies in deze handleiding nauwkeurig worden opgevolgd. Het gebruik van de Q-Go loophulp op een andere manier dan hierin beschreven valt buiten de verantwoordelijkheid van Nijland Cycling.



Beheer

Tips

- Gebruik voor het schoonmaken nooit een hogedrukreiniger, het water kan vet wegnemen en draaiende onderdelen eerder laten slijten. Gebruik hiervoor een schone doek.
- Smeer de remmen nooit in met smeermiddelen, dit kan de werking verminderen.
- Als u of uw dealer het stuur/zadel in de hoogte wilt verstellen, moet er rekening mee gehouden worden dat de veiligheidsmarkering niet te zien mag zijn.
- Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers tijdens het gebruik van de Q-Go.

Onderhoud

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je fiets. We raden aan om reparaties en service door je dealer te laten uitvoeren. Om langdurig plezier van je fiets te hebben, is het erg belangrijk dat je regelmatig de volgende punten controleert:

Maandelijks:

Controleer maandelijks de bandenspanning, de werking van de reflectoren, de remmen en of de zadel- en stuurpen stevig vastzitten. Controleer daarnaast of er geen speling in het balhoofdstel zit of er slinger in de wielen aanwezig is.

Halfjaarlijks:

Vet de zadelpen en stuurpen in om slijtage te voorkomen. Controleer of de wielassen goed vastzitten, controleer de bevestigingsbouten en het balhoofdstel op speling. Controleer ook de schroeven van het zadel en het stuur.

Jaarlijks:

Laat uw Q-Go minimaal één keer per jaar door uw dealer controleren. Hierbij wordt het frame, de voorvork, de wielen, de remmen en de naaf gecontroleerd. Ook de velgen dienen gecontroleerd te worden op vervorming en scheuren.

Achterin deze handleiding vindt u een onderhoudshistorie, waarin alle uitgevoerde werkzaamheden zijn geregistreerd.



Let op: De onderdelen die tijdens het onderhoud worden vervangen, dienen van hetzelfde merk en type te zijn als door Nijland Cycling gebruikt is. Het is niet toegestaan om andere onderdelen hiervoor te gebruiken.

Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Neem daarom onderstaande punten in acht om een veilige en plezierige rit te waarborgen:

- De Q-Go is persoonsgebonden.
- Zorg dat de maatstelling van de Q-Go is afgesteld op u als gebruiker.
- Zorg ervoor dat elke keer voordat de Q-Go wordt gebruikt, deze zich in goede conditie verkeert. Controleer vóór elke rit de correcte werking van de remmen en zorg ervoor dat er voldoende lucht in de banden aanwezig is.
- Controleer met regelmaat of de wielen, het stuur en het zadel goed vast zitten en ook of alle schroefverbindingen goed aangedraaid zijn.
- Gebruik de Q-Go op een zo solide en vlakke ondergrond mogelijk. Hou rekening met kuilen en oneffenheden, pas hierop uw snelheid aan.
- Gebruik voor het reinigen geen hogedruk- of stoomreiniger.
- Bij de Q-Go wordt geen slot meegeleverd. We raden aan een degelijk kabelslot te gebruiken.
- Zet de Q-Go te allen tijde op slot als u het hulpmiddel onbeheerd achterlaat.
- Let op dat er zich bij afdalingen geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt.
- Houd er rekening mee dat de remafstand bij slecht weer beduidend langer is op nat wegdek.
- Tijdens een zwangerschap is extra voorzichtigheid vereist in verband met een verhoogde kans op letsel.
- Zet de Q-Go niet in direct zonlicht: de temperatuur van sommige onderdelen kan risicovol zijn. Bij het in contact komen met de huid kan dit mogelijk overgevoeligheid van de huid als gevolg hebben.
- Laat na een ongeval of incident de Q-Go controleren, ook als er geen zichtbare schade is.
- Neem altijd een mobiele telefoon mee en zorg dat u het telefoonnummer van uw dealer in uw contacten heeft staan.
- Zorg ervoor dat u altijd goed voorbereid op pad gaat.
- Let op met het nemen van haakse/scherpe bochten en drempels, pas hierop uw snelheid aan.

Extra aandacht is vereist indien een kind de Q-Go gebruikt.

- Laat een kind nooit alleen met de Q-Go zonder toezicht.
- Laat een kind altijd een helm dragen. Let op dat de helm correct past.
- Laat een kind opvallende reflecterende kleding dragen, zodat hij/zij goed wordt gezien door andere weggebruikers.
- Waarschuw het kind dat het tijdig moet remmen bij afdalingen en het inrijden van tunnels, zodat hij/zij geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt.
- Het is aan te bevelen om aan de Q-Go een vlaggetje te monteren, die boven het kind uitsteekt.

Voorkom diefstal

- Zet uw Q-Go altijd op slot.
- Gebruikt u een kabelslot, dan kunt u uw Q-Go verankeren aan een hek of paal. Als de kabel lang genoeg is, haal hem dan door het frame en het voorwiel.
- Elke Q-Go heeft een uniek framenummer, deze is te vinden op de framesticker welke zich op de zadelbuis bevindt.

Framenummer: _____



Componenten

Reflectoren

De Q-Go is aan de voor en achterzijde voorzien van reflectoren.

Banden

Als uw banden niet op de juiste spanning zijn dan zullen ze sneller slijten. Daarom raden wij u aan regelmatig te controleren of uw banden op de juiste spanning zijn. De banden zijn op de juiste spanning, wanneer u ze nog net iets met uw duim in kunt drukken. U rijdt op harde banden veel plezieriger. Een juiste bandenspanning vereenvoudigt tevens het sturen. De aanbevolen hoeveelheid bar (bandenspanning) voor de Q-Go ligt tussen de 2.4 en de 3.5 bar.

Remmen


De remmen behoren tot de belangrijkste onderdelen van uw hulpmiddel. De Q-Go is voorzien van één rem op het voorwiel. Gebruik de rem gedoseerd om vaart te minderen. Controleer altijd voordat u de Q-Go gebruikt of de remmen goed functioneren. Als u merkt dat de remhevel bijna tot het handvat getrokken moet worden, dan moet de rem opnieuw afgesteld worden. Laat dit altijd door uw dealer doen.



Zadel

Bij aflevering van de Q-Go zal uw dealer samen met u het zadel op de juiste hoogte afstellen. Als u de hoogte zelf wilt aanpassen, opent u de zadelpenklem en trekt u de zadelpen omhoog of duwt u deze omlaag naar de gewenste hoogte. Sluit vervolgens de zadelpenklem om de zadelpen stevig in de zitbuis te vergrendelen (zie figuur 1).

Let op: De veiligheidsmarkering op de zadelpen moet altijd verborgen zijn om de veiligheid te waarborgen (zie figuur 2).

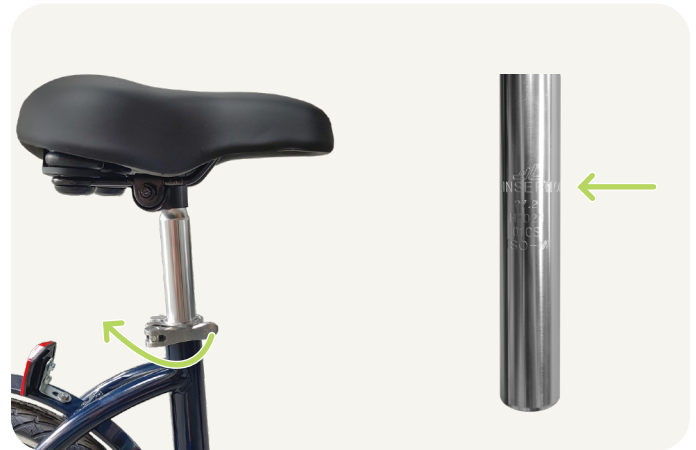


1 Het zadel verstellen

2 De hoogtemarkering

Stuur

U kunt de hoogte van het stuur aanpassen door de expanderbout (zie figuur 3) los te draaien en het stuur omhoog of omlaag te verplaatsen.

Let op: Zorg ervoor dat de veiligheidsmarkering op de stuurpen niet zichtbaar is wanneer het stuur in de stuurbuis is geplaatst (zie figuur 4).

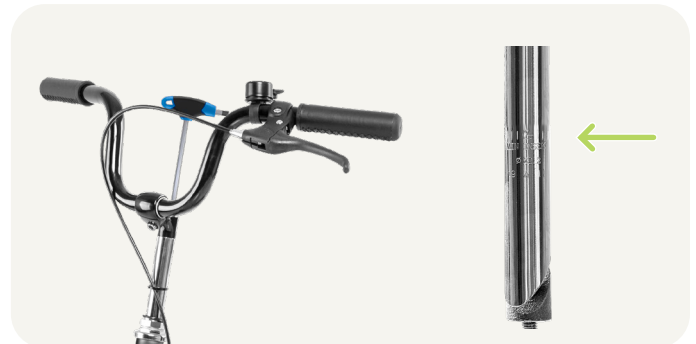

3 Draai de bout los met een inbusleutel

4 De hoogtemarkering

Handvatten

Hoewel wij de uiterste zorg besteden aan het monteren van handvatten kan het voorkomen dat deze door inwerking van zonlicht, temperatuurverschillen en ouderdom 'los' gaan zitten. Controleert u daarom regelmatig of de handvatten nog vast zitten door te proberen deze te verdraaien. Indien een handvat niet meer goed vast zit dient deze aangedraaid te worden met een inbusbout.

Slot

De Q-Go wordt geleverd zonder slot. Het is aan te raden om een kabelslot te gebruiken, dit voorkomt diefstal. Het kabelslot kan gebruikt worden door met het sleuteltje het slot te openen en vervolgens de Q-Go met kabel op slot te zetten. (Bij voorkeur aan een paal of hek).

Accessoires

Voor de Q-Go 1 (Medium) en Q-Go 2 (Large) zijn verschillende accessoires beschikbaar zoals:

- Mandje op stuur zilver afneembaar
- Verbreed zadel
- Verstelbare stuurpen, inbus verstelbaar
- Stokhouder, stuurmontage
- Q-go zijsteun (3-wieler)

Voor de Q-Go Junior (Small) zijn verschillende accessoires beschikbaar zoals:

- Mand vast klein
- Bananenzadel

Transport en opslag

- Mocht u de Q-Go willen vervoeren met de auto, zorg ervoor dat dit veilig gebeurt.
- Wij raden het aan om de Q-Go droog te stallen.
- Als u de Q-Go voor langere tijd stalt, raden wij aan om deze eerst te reinigen.
- Als u de Q-Go na langere tijd niet gebruikt te hebben weer gaat gebruiken is het belangrijk de bandenspanning te controleren en zo nodig de banden op te pompen.





Details

Specificaties

De Q-Go is een compact hulpmiddel die zorgt dat u eenvoudig grotere afstanden kunt afleggen als u niet zo lang kunt lopen. Doordat u op een zadel zit, worden de gewrichten en benen ontlast en kunt u lopend veilig op pad. De lage instap zorgt voor eenvoudig opstappen. De juiste zit- en loophoogte kan eenvoudig worden ingesteld door de in hoogte verstelbare zadelpen en het instellen van het stuur. Door zijn compactheid en lichte gewicht kunt u hem gemakkelijk meenemen in de auto of openbaar vervoer.

Lage instap


De Q-Go heeft een lage instap waardoor u gemakkelijk op het hulpmiddel stapt. De Q-Go zorgt voor een comfortabele en stabiele rijervaring.

Ontspannen zitten

Het ergonomische zadel van de Q-Go is ontworpen met het oog op comfort en ondersteuning tijdens lange ritten. Met zijn anatomische vorm en zachte bekleding vermindert het zadeldruk en voorkomt het ongemak.

Accessoires mogelijk

Heeft u speciale wensen of specifieke aanpassingen nodig om goed te kunnen bewegen? Geen probleem! De Q-Go kan worden aangepast aan uw behoeften. Het is mogelijk om de Q-Go te voorzien van verschillende accessoires, zoals een mand, stekhouder, breder zadel en verstelbare stuurpen.

	 Q-Go Junior (Small)	 Q-Go 1 (Medium)	 Q-Go 2 (Large)
Lengte (cm)	105	112	118
Breedte (cm)	56	57	57
Gewicht (kg)	9	9,5	9,9
Instelbare zadelhoogte (cm):	± 40 - 60	± 60 - 82	± 72 - 93
Instaphoogte (cm)	13	16	16
Voorwiel (inch)	12	16	16
Achterwiel (inch)	12	16	16
Max. gebruikersgewicht (kg per persoon)	60	175	175

Garantie

- Nijland Cycling geeft 5 jaar garantie op frame en voorvork.
- Er wordt 2 jaar garantie gegeven op overige onderdelen zover deze niet aan de normale slijtage onderhevig zijn.
- Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is niet overdraagbaar

Garantie wordt niet verleend indien:

- De Q-Go oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of is beschadigd door een ongeval.
- De onderdelen aan gewone slijtage onderhevig zijn; banden, kabels enz.
- De Q-Go niet is onderhouden zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
- Reparaties ondeskundig zijn uitgevoerd.
- De constructie van de Q-Go gewijzigd is.

Overige bepalingen

- U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien u het garantiebewijs samen met de aankoopbon kunt aantonen.

Garantiebewijs

Dit garantiebewijs dient u zorgvuldig in te vullen en samen met uw aankoopbewijs te bewaren tot 5 jaar na aankoopdatum.

• Gegevens van de Q-Go:

Merk en type: _____

Framenummer: _____

Aankoopdatum: _____

• Eigen gegevens:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

• Dealer gegevens:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____



Formulier service, onderhouden modificaties

U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien uw Q-Go de servicebeurten heeft gehad volgens onderstaand schema.

Servicebeurt:	Uitgevoerd op:	Paraaf dealer:
Na eerste 200 km of 2 maanden		
Servicebeurt 1 jaar na aflevering		
Servicebeurt 2 jaar na aflevering		
Servicebeurt 3 jaar na aflevering		
Servicebeurt 4 jaar na aflevering		
Servicebeurt 5 jaar na aflevering		

Wij adviseren u om ook na 5 jaar uw Q-Go een jaarlijkse servicebeurt te geven. Het nalaten hiervan heeft geen gevolgen voor de garantietermijn omdat deze na 5 jaar is verstreken.

Modificatie aan de Q-Go

Gewijzigd:	Uitgevoerd op:	Uitgevoerd door:

Let op! Alleen Nijland Cycling mag een modificatie op deze Q-Go uitvoeren.

