ACCE. 16001

UDI-DI 872026126TRISADJU

Gebruiksaanwijzing

Bondo



NIJLAND

nijland.com

Nijland Cycling, Gebruiksaanwijzing 2025

Branding & Design
Studio Debuut

Realisatie
Raoul Alferink

Fotografie
Melvin Winkeler

Redactie
Nijland Cycling

Risicoklasse:	1
Uitgifte datum:	1-1-2025
Versie:	1
Taal:	Nederlands

Bondo

	Model	EAN:
	Bondo	8720261260068
	Bondo LS	8720261260075
	Bondo E	8720261260082

© 2025 Nijland Cycling. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van eventuele onjuistheden of drukfouten. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming.

Inhoudsopgave

04

Informatie

Inleiding 4
Contactgegevens 5
Conformiteit 5
Eerste gebruik 5
Gebruik 5

06

Beheer

Tips 6
Onderhoud 6
Veiligheid 7
Voorkom diefstal 8

08

Componenten

Verlichting 8
Banden 9
Remmen 9
Zadel 10
Stuur 10
Versnellingen 11
Slot 11
Differentieel 11
Bagagemand 11
Milieu 11
Transport en opslag 12

13

Documentatie

Dimensies 13
Specificaties 14
Garantie 15
Garantiebewijs 15
Formulier service, onderhoud en modificaties 16
Onderhoudshistorie 17
Notities 18



Informatie

Inleiding

Deze handleiding geeft u belangrijke informatie over het gebruik van de Bondo. We raden u aan om deze goed door te lezen voordat u de fiets voor het eerst gebruikt. Zo leert u de belangrijkste onderdelen kennen en ontdekt u hoe u veilig en comfortabel kunt fietsen.

Het is belangrijk om de instructies in deze handleiding te volgen. Dit zorgt niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. Bovendien helpt het om uw fiets in goede staat te houden en er optimaal van te genieten.

Bewaar deze handleiding op een handige plek, zodat u deze altijd kunt raadplegen. Voor de nieuwste versie kunt u contact opnemen met Nijland Cycling. We zorgen ervoor dat u altijd de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft.

We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de Bondo. Geniet van elke rit, wetende dat u goed voorbereid op pad gaat.

Met vriendelijke groet,

Team Nijland Cycling

Contactgegevens

Nijland Cycling B.V.
Telgenweg 12
8111 CM Heeten

+31(0)572 382 222

info@nijland.com

www.nijland.com

Conformiteit

Nijland Cycling verklaart als fabrikant dat de Bondo wordt geproduceerd conform de MDR verordening (EU) 2017/745, risicoklasse 1. Het elektrische model voldoet aan de richtlijn 2006/42/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EU en de NEN-EN 15194:2017 Fietsen - Elektrisch ondersteunende fietsen - EPAC Fietsen - part 4.2 Electrical requirements. De conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de fabrikant.

Eerste gebruik

Uw dealer dient onderstaande punten met u door te nemen:

1. Verzeker u ervan dat de fiets juist is afgesteld voor uw lichaamslengte en gewicht.
2. Oefen in een rustige omgeving om vertrouwd te raken met de fiets en een goede controle te ontwikkelen.
3. Oefen het gebruik van de handremmen op verschillende soorten ondergrond.
4. Probeer op verschillende snelheden te fietsen en leer hoe u het evenwicht moet bewaren.
5. Neem de tijd om te wennen aan de fiets en verhoog geleidelijk de afstand van de rit.
6. Controleer regelmatig de fiets en zorg ervoor dat alles op de juiste manier werkt en is afgesteld.

Paraaf Dealer: _____ **Datum:** _____

Gebruik

De Bondo driewielfiets is ontworpen voor kinderen met verminderde mobiliteit, stabiliteit, coördinatie of andere beperkingen in hun natuurlijke bewegingsmogelijkheden. Tijdens het gebruik kan toezicht nodig zijn. Als het kind een beperkt geestelijk waarnemingsvermogen heeft, moet een toezichthouder duidelijke instructies geven over het veilige gebruik van de Bondo. Het kind moet zelfstandig kunnen bewegen en op een verantwoorde manier aan het verkeer kunnen deelnemen, waarbij de verkeersregels worden nageleefd. Het is belangrijk dat de instructies in deze handleiding worden opgevolgd. Wanneer de Bondo op een andere manier wordt gebruikt dan hierin is beschreven, kan Nijland Cycling niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel.



Beheer

Tips

- Gebruik voor het schoonmaken nooit een hogedrukreiniger, het water kan vet wegnemen en draaiende onderdelen eerder laten slijten. Gebruik hiervoor een schone doek.
- Smeer de remmen nooit in met smeermiddelen, dit kan de werking verminderen.
- Als u of uw dealer het stuur/zadel in de hoogte wilt verstellen, moet er rekening mee gehouden worden dat de veiligheidsmarkering niet te zien mag zijn.
- Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers terwijl u op de fiets rijdt.
- Wij raden u aan een fietsverzekering af te sluiten.

Onderhoud

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je fiets. We raden aan om reparaties en service door je dealer te laten uitvoeren. Om langdurig plezier van je fiets te hebben, is het erg belangrijk dat je regelmatig de volgende punten controleert:

Maandelijks:
Controleer iedere maand uw bandenspanning, werkt de verlichting, werken de remmen op de juiste manier, zitten de pedalen en de cranks stevig vast, zit er geen speling op het balhoofdstel, is de spaakspanning juist, zit er geen slinger in het wiel en zit de zadel- en stuurpen goed vast.

Halfjaarlijks:
Vet de zadelpen en stuurpen in, controleer of de wielassen goed vastzitten en of alle bevestigingsbouten stevig zijn aangedraaid. Controleer daarnaast op speling op het balhoofdstel, draai de schroeven van het zadel en stuur na, en smeer de pedaalas in met vet.

Jaarlijks:
Laat uw fiets minimaal één keer per jaar door uw dealer controleren. De volgende onderdelen dienen hierbij nagekeken te worden: aandrijving, frame, voorvork, wielnaven, verlichting, spaakspanning, remmen en lagers. Controleer bovendien de velgen op vervorming, scheuren en roestvorming.

Achter in deze handleiding vindt u de onderhoudshistorie, met een overzicht van alle uitgevoerde werkzaamheden.

> ***Let op:*** *Onderdelen die tijdens het onderhoud worden vervangen, moeten van hetzelfde merk en type zijn als die door Nijland Cycling worden gebruikt. Het is niet toegestaan andere onderdelen te monteren.*

Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Neem daarom onderstaande punten in acht om een veilige en plezierige rit te waarborgen:

- De fiets is persoonsgebonden.
- Zorg dat de maatstelling van de fiets is afgesteld op u als gebruiker.
- Zorg ervoor dat elke keer voordat de fiets wordt gebruikt, deze zich in goede conditie verkeert. Controleer vóór elke rit de correcte werking van de remmen, de correcte werking van de verlichting en zorg ervoor dat er voldoende lucht in de banden aanwezig is.
- Controleer met regelmaat of de wielen, het stuur en het zadel goed vast zitten en ook of alle schroefverbindingen goed aangedraaid zijn.
- Gebruik de fiets op een zo solide en vlakke ondergrond mogelijk. Hou rekening met kuilen en oneffenheden, pas hierop uw snelheid aan.
- Pas op dat wijde broeken, wapperende kledingstukken en losse veters niet vast komen te zitten in de ketting, de spaken of de pedalen.
- Gebruik voor het reinigen geen hogedruk- of stoomreiniger.
- Gebruik de parkeerrem als u de fiets parkeert (en achterlaat). Blokkeer met de parkeerrem ook de fiets tegen wegrijden tijdens op- en afstappen.
- Zet de driewieler te allen tijde op slot als u de fiets onbeheerd achterlaat.
- Let op dat er zich bij afdalingen geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt. Rem tijdig en pas uw snelheid aan naar de omstandigheden.
- Houd er rekening mee dat de remafstand bij slecht weer beduidend langer is op nat wegdek.
- Tijdens een zwangerschap is extra voorzichtigheid vereist in verband met een verhoogde kans op letsel.
- Zet de fiets niet in direct zonlicht: de temperatuur van sommige onderdelen kan risicovol zijn. Bij het in contact komen met de huid kan dit mogelijk overgevoeligheid van de huid als gevolg hebben.
- Bij de elektrisch ondersteunde Bondo: Neem de tijd om aan de functies van de ondersteuning te wennen. Let altijd goed op als u de ondersteuning inschakelt. Oefen met het versnellen van de elektromotor.
- Laat na een ongeval of incident de fiets controleren, ook als er geen zichtbare schade is.
- Neem altijd een mobiele telefoon mee en zorg dat u het telefoonnummer van uw dealer in uw contacten heeft staan.
- Zorg ervoor dat u altijd goed voorbereid op pad gaat.
- Let op met het nemen van haakse/scherpe bochten en drempels, pas hierop uw snelheid aan.

Extra aandacht is vereist indien een kind de fiets gebruikt.

- Laat een kind nooit alleen met de fiets zonder toezicht.
- Laat een kind altijd een fietshelm dragen. Let op dat de helm correct past.
- Laat een kind opvallende reflecterende kleding dragen, zodat hij/zij goed wordt gezien door andere weggebruikers.
- Waarschuw het kind dat het tijdig moet remmen bij afdalingen en het inrijden van tunnels, zodat hij/zij geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt.
- Het is aan te bevelen om aan de fiets een vlaggetje te monteren, die boven het kind uitsteekt.

Montage van accessoires

- Het monteren van accessoires is uitsluitend toegestaan wanneer de fiets hiervoor volgens de productspecificaties geschikt is. Volg altijd de montage-, gebruiks- en veiligheidsinstructies van de fabrikant van het betreffende accessoire en laat de montage uitvoeren door een vakbekwaam persoon.

Let op: gemonteerde accessoires kunnen de rijeigenschappen van de fiets beïnvloeden.

Voorkom diefstal

- Zet uw fiets altijd op slot.
- Gebruikt u een kabelslot, dan kunt u uw fiets verankeren aan een hek of paal. Als de kabel lang genoeg is, haal hem dan door het frame en het voorwiel.
- Elke fiets heeft een uniek framenummer, deze is te vinden op de framesticker welke zich op de zadelbuis bevindt.

Framenummer: _____



Componenten

Verlichting

Bij de elektrisch ondersteunde Bondo is de verlichting aangesloten op de accu. Dit betekent dat u de verlichting aan kunt zetten door de plus (+) knop op de stuurbediening 2 seconden in te drukken. De voor- en achterlamp gaan dan tegelijk aan. Wilt u de verlichting weer uitzetten, dan drukt u nogmaals 2 seconden op de plus (+) knop. De niet- elektrisch ondersteunde Bondo is uitgevoerd met batterijverlichting. U kunt de koplamp in- en uitschakelen door het aan/uit knopje op de koplamp in te drukken. U kunt het achterlicht in- en uitschakelen door het aan/uit knopje op het achterlicht in te drukken.

Banden

Als uw banden niet op de juiste spanning zijn dan zullen ze sneller slijten. Daarom raden wij u aan regelmatig te controleren of uw banden op de juiste spanning zijn. De banden zijn op de juiste spanning, wanneer u ze nog net iets met uw duim in kunt drukken. U rijdt op harde banden veel plezieriger, want u hoeft minder kracht op de pedalen te zetten. Een juiste bandenspanning vereenvoudigt tevens het sturen. De aanbevolen hoeveelheid bar (bandenspanning) kunt u vinden op de banden van uw fiets of bij het hoofdstuk **Dimensies** achterin deze gebruiksaanwijzing.

Remmen

De remmen behoren tot de belangrijkste onderdelen van uw fiets. Gebruik zoveel mogelijk beide remmen om zo gedoseerd mogelijk vaart te kunnen minderen. Controleer altijd voordat u gaat fietsen of de remmen goed werken. Als u merkt dat u de remhevels bijna tot aan het handvat moet trekken voordat u remt, dan moeten de remmen opnieuw afgesteld worden. De remhendel van de voorrem is links gemonteerd en de remhendel van de achterrem is rechts gemonteerd.


De Bondo beschikt over een parkeerrem in plaats van een fietsstandaard. In situaties waar de fiets niet zou blijven staan kunt u deze gebruiken. Zodra de parkeerrem tegen de remhendel komt, staat de fiets op de rem (Figuur 1).

De Bondo is uitgevoerd met een terugtrapnaaf, freewheelnaaf of vast tandwiel.

Terugtrapnaaf:
Wanneer u de pedalen achteruit beweegt wordt het achterwiel geremd. U heeft alleen een remhendel links deze is bestemd voor de voorrem.

Freewheelnaaf:
Met een freewheelnaaf kunt u niet remmen via de pedalen, dit kan alleen met de remhevels aan het stuur. U heeft zowel links als rechts een remhendel.

Vast tandwiel:
Met een vast tandwiel kun je remmen door achterwaartse druk uit te oefenen op de pedalen. Je kunt ook de remhendel voor de voorrem gebruiken.

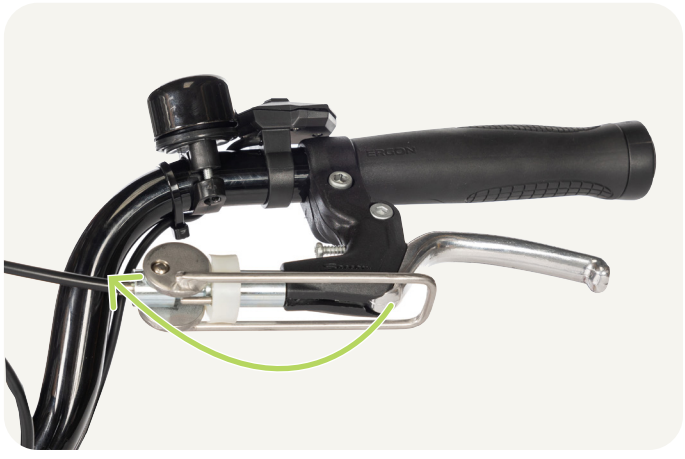


1 Door deze hendel te bewegen kunt u de parkeerrem (de-)activeren.

Zadel

Wanneer u op het zadel zit, is deze op de juiste hoogte afgesteld als uw tenen de grond licht kunnen raken. De hoek van het zadel kan worden versteld door de bout met een steeksleutel los te draaien. De hoogte kan worden aangepast door de snelspanner los te draaien (Figuur 2). Na het verstellen van het zadel moet de klem en de bout goed vastgezet worden.

> ***Let op:*** *De veiligheidsmarkering op de zadelpen mag niet zichtbaar zijn als de zadel in de zadelbuis zit (Figuur 3).*

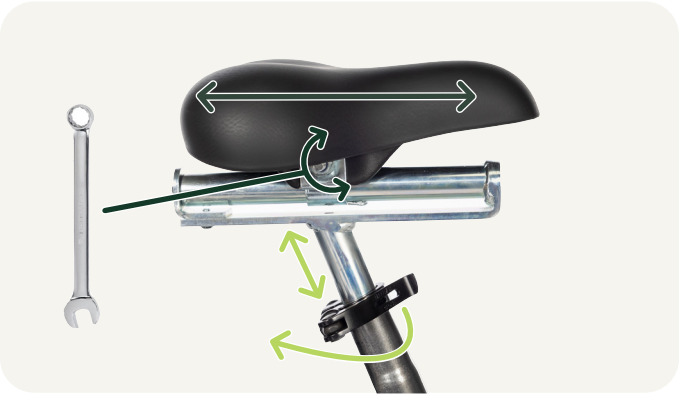

2 Zadelverstelsysteem



3 Hoogtemarkering

Stuur

Het stuur kunt u verstellen in hoogte, dit kunt u doen door de expanderbout los te draaien en het stuur omhoog/omlaag te duwen (Figuur 4).

> ***Let op:*** *De veiligheidsmarkering op de stuurpen mag niet zichtbaar zijn als het stuur in de stuurbuis zit (Figuur 5).*



4 Draai de bout los met een inbussleutel



5 Hoogtemarkering

Versnellingen

Uw fiets kan uitgevoerd zijn met versnellingen. Indien uw fiets met versnellingen is uitgevoerd, bevindt er zich op het stuur een gripshift (Figuur 6).

Wanneer u richting de + draait, kunt u zwaarder trappen. Wanneer u richting de - draait, kunt u lichter trappen.



6 Gripshift

Slot

De Bondo is standaard uitgerust met een spiraalslot dat aan de zitbuis is gemonteerd. Bij het op slot zetten van de fiets wordt aanbevolen om het spiraalslot door het wiel en het frame te halen. Voor optimale beveiliging kunt u de fiets ook vastmaken aan een vast object, zoals een paal of hek.

Differentieel

De Bondo heeft een differentieel. Dit systeem zorgt ervoor dat de achterwielen onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Dit is nodig om prettige bochten te kunnen maken. Als u merkt dat het sturen zwaarder gaat dan gebruikelijk, en u weerstand ondervind op de achterwielen dan dient de fiets gecontroleerd te worden door uw dealer.

Bagagemand

De Bondo is standaard voorzien van een ruime bagagemand om uw spullen makkelijk mee te kunnen nemen. Zorg er wel voor dat spullen stabiel staan en vastgezet zijn met bijvoorbeeld een spin. De bagagemand is niet geschikt om andere manden aan te bevestigen.

Milieu

Een defecte, lekkende, gevallen of vervormde accu dient direct te worden vervangen. De oude accu dient te worden ingeleverd bij de dealer of de milieustraat van de gemeente.

Transport en opslag

- Mocht u de Bondo transporteren per voertuig, zorg dat dit veilig gebeurt en maak daarnaast altijd gebruik van de parkeerrem.
- Het is verboden om iemand op de Bondo te vervoeren als deze met transport gaat.
- Wij raden het aan om de Bondo te allen tijde droog te bewaren.
- Wanneer de fiets voor langere tijd wordt opgeslagen, dient u vóór gebruik de bandenspanning te controleren. De bandenspanning moet overeenkomen met de door de fabrikant genoemde waarden.
- Het is van belang dat u de gebruiksaanwijzing van uw accu leest, met name als uw driewieler voor een langere tijd stil staat. Dit in verband met ontladingsvoltages.
- Voordat u de driewieler voor langere tijd opslaat raden wij het aan om deze te reinigen.



Details

Dimensies



	Bondo
Totale lengte:	131 cm
Totale breedte:	67 cm
Gewicht:	21,5 kg, elektrisch model: 29 kg
Geschikte binnenbeenlengte:	44 – 63 cm
Crank lengte:	11 cm
Maximale belasting:	60 kg
Instaphoogte:	27 cm
Max. toelaatbaar gewicht bagagemand:	25 kg
Bandenmaat voor:	20 x 1.75 inch
Bandenmaat achter:	16 x 1.75 inch
Bandenspanning:	Voor: 2.8 - 4.5 bar / Achter: 2.5 - 4.5 bar

Specificaties

Frame:	Stalen frame met 2 laags poedercoat lak
Kleur:	Titan grey, Parelblauw of RAL wenskleur
Elektrisch systeem:	Bafang 250W voorwielmotor
Accu:	Uitneembare 378Wh accu
Verlichting:	Bij elektrisch model op accu, bij niet elektrisch model op batterij
Aandrijving:	7 versnelling terugtraprem, 7 versnelling vrijloop, of vast tandwiel
Kettingkast:	Gesloten kettingkast
Stuur:	Zwart gecoat metalen stuur
Zadel:	Kinderzadel
Wielen:	Geschaafd voorwiel en gecoate achterwielen met roestvrijstalen spaken
Spatborden:	Zwart gecoat aluminium
Banden:	Schwalbe Road Cruiser en Marathon Plus
Pedalen:	Pedalen met antislip
Cranks:	Zwarte stalen cranks
Remmen voor:	V-Brake (Velgrem)
Remmen achter:	Rollerbrake of terugtraprem
Opties:	Verschillende opties mogelijk, informeer bij uw dealer

Garantie

- Nijland Cycling geeft 5 jaar garantie op frame en voorvork.
- Er wordt 2 jaar garantie gegeven op overige onderdelen zover deze niet aan de normale slijtage onderhevig zijn.
- Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is niet overdraagbaar

Garantie wordt niet verleend indien:

- De fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of is beschadigd door een ongeval.
- De onderdelen aan gewone slijtage onderhevig zijn; banden, kabels enz.
- De fiets niet is onderhouden zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
- Reparaties ondeskundig zijn uitgevoerd.
- De constructie van de fiets gewijzigd is.

Overige bepalingen

- U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien u het garantiebewijs samen met de aankoopbon kunt aantonen.

Garantiebewijs

Dit garantiebewijs dient u zorgvuldig in te vullen en samen met uw aankoopbewijs te bewaren tot 5 jaar na aankoopdatum.

- **Fietsgegevens:**
  Merk en type: _____
  Framenummer: _____
  Aankoopdatum: _____

- **Eigen gegevens:**
  Naam: _____
  Adres: _____
  Postcode en woonplaats: _____

- **Dealer gegevens:**
  Naam: _____
  Adres: _____
  Postcode en woonplaats: _____
  Telefoonnummer: _____

Formulier service, onderhouden modificaties

U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien uw fiets de servicebeurten heeft gehad volgens onderstaand schema.

	Servicebeurt:	Uitgevoerd op:	Paraaf dealer:
	Na eerste 200 km of 2 maanden		
	Servicebeurt 1 jaar na aflevering		
	Servicebeurt 2 jaar na aflevering		
	Servicebeurt 3 jaar na aflevering		
	Servicebeurt 4 jaar na aflevering		
	Servicebeurt 5 jaar na aflevering		

Wij adviseren u om ook na 5 jaar uw fiets een jaarlijkse servicebeurt te geven. Het nalaten hiervan heeft geen gevolgen voor de garantietermijn omdat deze na 5 jaar is verstreken.

Modificatie aan de fiets

	Gewijzigd:	Uitgevoerd op:	Uitgevoerd door:

Let op! Alleen Nijland Cycling mag een modificatie op deze fiets uitvoeren.

Onderhoudshistorie

Onderrhoud:

Notities

Notities:

NIJLAND

Telgenweg 12
8111 CM Heeten

E: info@nijland.com
T: 0572-38 22 22

nijland.com